

TECNO SAVE


 **Tecnoline**
Medical & Surgical Solutions

SISTEMA
DI RECUPERO SANGUE
POST-OPERATORIO
ORTOPEDICO



CSQ
ISO 13485

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI CEI EN ISO 13485:2016

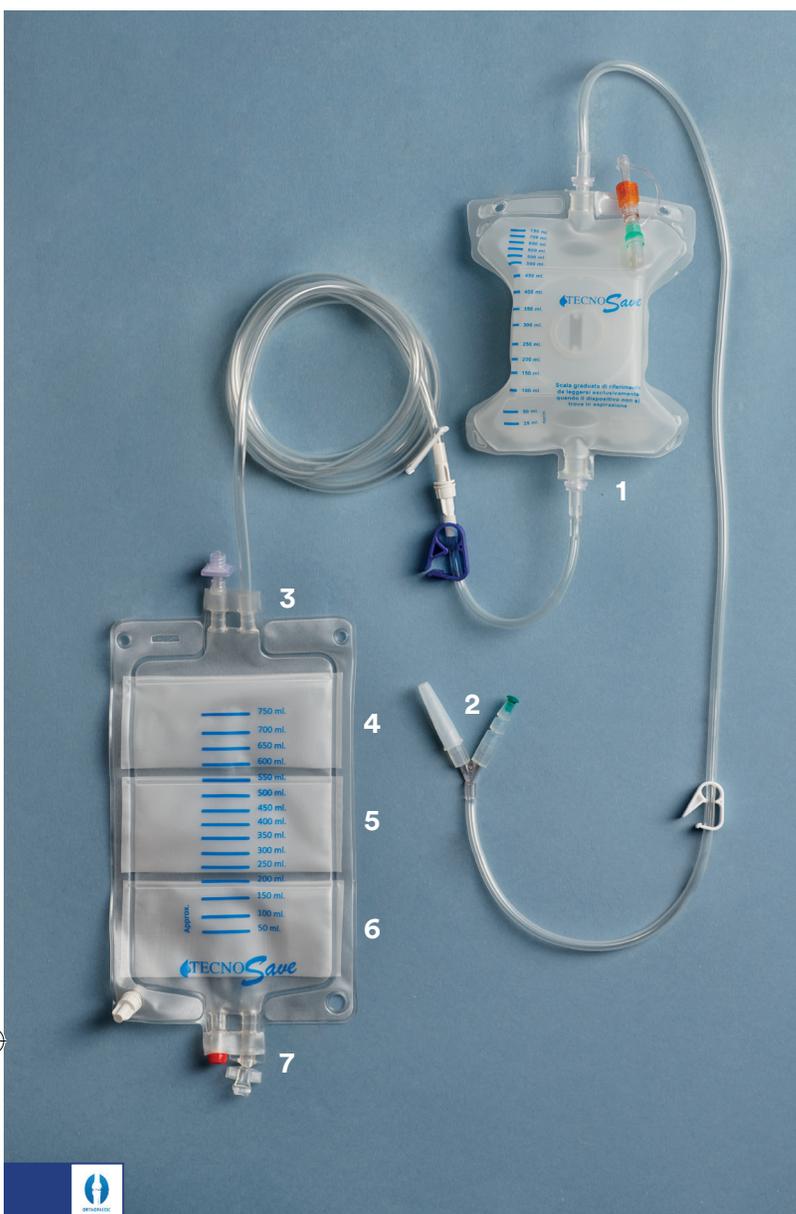

DESCRIZIONE

TecnoSave è un sistema completo monouso a circuito chiuso, per il drenaggio chirurgico post-operatorio, la raccolta ed il recupero di sangue autologo per l'autotrasfusione immediata. TecnoSave ha una pressione iniziale di 140 mmHg (18,66 KPa) ed una pressione media di lavoro di circa 40 mmHg (5,33 KPa). Il dispositivo è fornito precaricato, e grazie alla sua struttura, ogni qualvolta viene trasferito il sangue nell'unità di autotrasfusione per la trasfusione, esso si ricarica automaticamente. L'unità per autotrasfusione è composta da una sacca con tre differenti livelli di filtraggio a cascata: macrofiltro da 120 micron, filtro intermedio da 80 micron e un filtro per micro-aggregati da 40 micron.

1 - UNITÀ DI RACCOLTA AUTORIATTIVABILE
CAPACITÀ 750ML

2 - DOPPIO CONNETTORE MULTICALIBRO

3 - SACCA DI RACCOLTA CON FILTRO A CASCATA

4 - RETE FILTRANTE 120 MICRON

5 - RETE FILTRANTE 80 MICRON

6 - RETE FILTRANTE 40 MICRON

7 - CONNESSIONE PER LA REINFUSIONE

COD.

DESCRIZIONE

Q.TÀ/CONF.

TEC859

Dispositivo per autotrasfusione postoperatoria ortopedico

10 pz

CE 0051



 **Tecnoline**

Tecnoline S.p.A.
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
T 0535 40312 M info@tecnolinemed.com