

TECNO 3 “CCC”

COMPLETE CLOSED CIRCUIT

 **Tecnoline**
Medical & Surgical Solutions

New

BIOS.C

Line



OZONOTERAPIA

Dispositivo medico a circuito chiuso destinato all'autoemoterapia ozonizzata che consiste nel prelievo ematico, seguito dal trattamento con miscela gassosa di ossigeno/ozono e successiva reinfusione al paziente.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

trattamento di stati patologici in cui è necessaria una stimolazione del sistema immunitario e/o una maggiore ossigenazione dei tessuti.



COMPANY WITH MANAGEMENT CERTIFIED SYSTEM ISO 13485:2016 IMQ

SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo medico sterile monouso a circuito chiuso PHTHALATES FREE, con linea di prelievo e re-infusione pre-connesse, camera di gocciolamento con filtro 200 micron e con connessioni needle free per l'utilizzo senza ago.

VANTAGGI:

- Nessun contatto con ambiente esterno al dispositivo
- Sistema By-pass di emergenza in caso di interruzione della linea di re-infusione
- Connessione prossimale al paziente per prelievi o infusioni di farmaci aggiuntivi
- Connessione per l'insufflazione della miscela Ozono - Ossigeno munita di valvola unidirezionale per evitare eventuali fuoriuscite di sangue e filtro antibatterico di protezione da eventuali contaminazioni esterne.



KIT OZONOTERAPIA DISPONIBILI

COD.	DESCRIZIONE	Q.TÀ/CONF.
TEC865	TECNO3 CCC con dosatore variabile incorporato (anticoagulante ACDA)	15 pz
TEC876	TECNO3 CCC con sacca preriempita con 20ml di anticoagulante ACDA	20 pz
TEC876/35	TECNO 3CCC con sacca preriempita con 35ml di anticoagulante ACDA	20 pz


NEW BIOS.C LINE

CCP876	TECNO3 CCC con sacca preriempita con 20ml di anticoagulante ACDA <u>BIOS.C</u>	20 pz
CCP876/35	TECNO 3CCC con sacca preriempita con 35ml di anticoagulante ACDA <u>BIOS.C</u>	20 pz

CE 0051

BIOS.C LINE

Il dispositivo TECNO3 "CCC" BIOS.C è realizzato con un trattamento di rivestimento delle superfici in contatto con il sangue con caratteristiche non trombogeniche consistente in un film polimerico con gruppi prostetici di fosforilcolina; in tal modo si ottiene una struttura biomimetica simulante la struttura delle superfici cellulari. Questo meccanismo di biomimetismo permette di ridurre le reazioni avverse che si instaurano quando il sangue viene in contatto con materiali estranei poco biocompatibili.

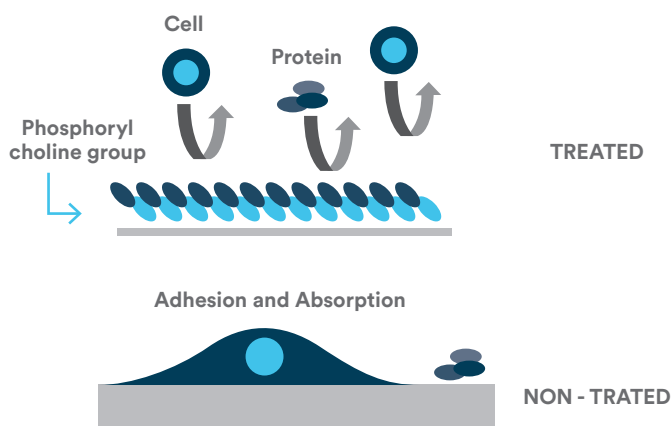

ACCESSORI

EO51P	Bilancia per prelievo	1 pz
-------	-----------------------	------



Tecnoline S.p.A.
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
T 0535 40312 M info@tecnolinemed.com