




# Tecnoline

Medical & Surgical Solutions

# TECNOSAVE

Sistema di recupero  
sangue post-operatorio

SCAN ME

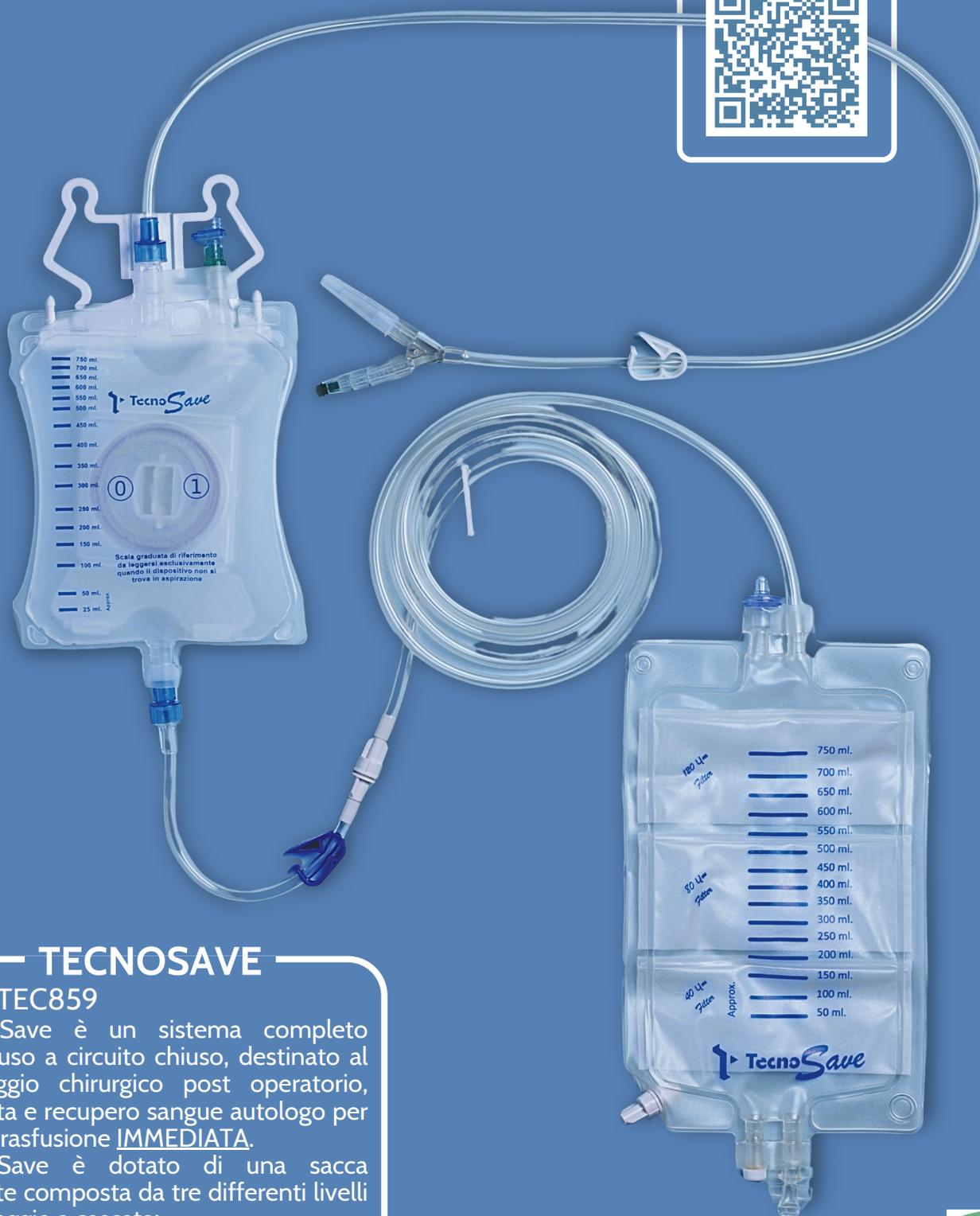

## TECNOSAVE

Cod. TEC859

TecnoSave è un sistema completo monouso a circuito chiuso, destinato al drenaggio chirurgico post operatorio, raccolta e recupero sangue autologo per l'autotrasfusione **IMMEDIATA**.

TecnoSave è dotato di una sacca filtrante composta da tre differenti livelli di filtraggio a cascata:

- Macrofiltro da 120 micron
- Filtro intermedio da 60 micron
- Filtro per micro-aggregati da 40 micron



# SISTEMA TECNOSAVE

TecnoSave è un sistema completo monouso a circuito chiuso, destinato al drenaggio chirurgico post operatorio, raccolta e recupero sangue autologo per l'autotrasfusione IMMEDIATA.

Il dispositivo ha una pressione iniziale di 140mmhg ed una pressione media di lavoro di circa 40mmhg.


TecnoSave che viene fornito pre-caricato, grazie alla sua struttura, dopo aver trasferito il sangue alla sacca filtrante, è in grado di riattivarsi autonomamente.

TecnoSave è dotato di una sacca filtrante composta da tre differenti livelli di filtraggio a cascata:

- Macrofiltro da 120 micron
- Filtro intermedio da 80 micron
- Filtro per micro-aggregati da 40 micron

## COMPONENTI SISTEMA TECNOSAVE

1. Doppio connettore multi-calibro
2. Unità di raccolta auto-riattivabile da 750ml
3. Sacca di raccolta con filtrazione a cascata
4. Rete filtrante da 120 micron
5. Rete filtrante da 80 micron
6. Rete filtrante da 40 micron
7. Connessione per la reinfusione

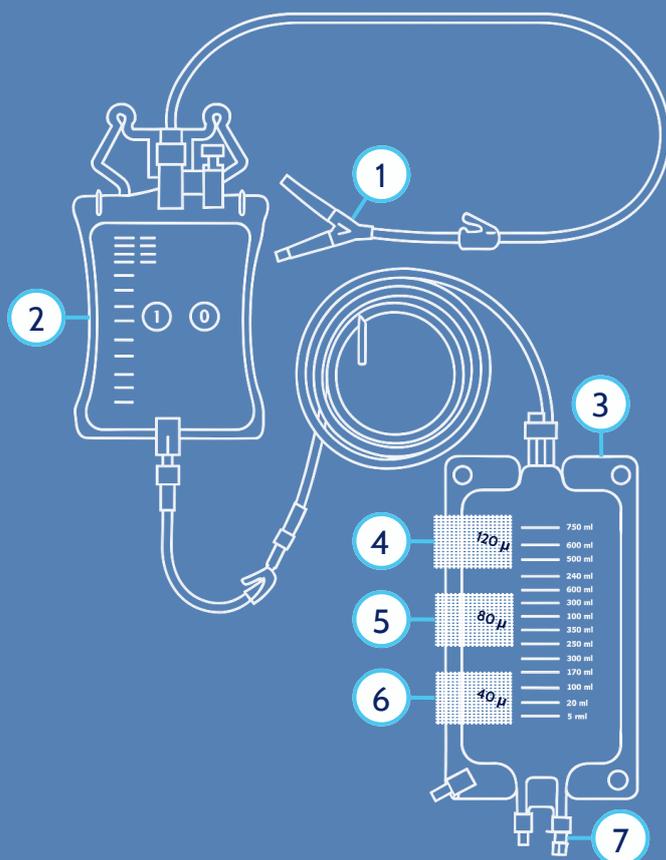

## GUIDA ALL' ORDINE

CODICE

DESCRIZIONE

QUANTITA'

TEC859

TECNOSAVE

10 PZ



Tecnoline S.p.A.  
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy  
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy  
T (+39) 0535 40312 M info@tecnolinemed.com

 **Tecnoline**  
Medical & Surgical Solutions



Rev.5 17/07/2024